

MacroZoom MZ.4700(-HDS)

digital y autofocus 4K/1080p

LO MAS DESTACADO

- Software integrado o software externo conectado a un PC
- Sensor Sony 1/2,8" 4K/1080P CMOS con ratio de zoom óptico de 18x
- Factor de zoom óptico de hasta 5,6x
- Ampliación en pantalla de 2,8 a 47x
- Distancia de trabajo 205 - 215 mm
- Anillo de luz LED estándar
- Anillo de luz LED direccional opcional
- Mouse
- 2 años de garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETIVO ZOOM

- El objetivo de 16 elementos tiene una relación de zoom de 18x y produce aumentos de hasta 0,56x con una función de enfoque manual o automático
 - Campo de visión de 255 x 145 mm (zoom 1x) a 14 x 8 mm (zoom 18x)
 - Ampliación en pantalla de 2,8 a 47x @190 mm WD (pantalla de 24")
 - El rango de enfoque está entre 205 y 225 mm
- WD = distancia de trabajo*

CAMARA

- La cámara de 8,3 MP está equipada con un sensor Sony de alta definición 4K UHD/1080P CMOS de 1/2,8 pulgadas con una alta relación señal-ruido que genera una transmisión de video de 3840 x 8160 píxeles de hasta 60 imágenes por segundo
- La señal 4K/UHD se ajusta a la entrada HDMI de una pantalla HD
- El almacenamiento de imágenes y videos se realiza con una tarjeta SD incorporada
- Funciona con software integrado en el MacroZoom o conectado a un PC (se incluye software ImageFocus Alpha)

SOFTWARE INTEGRADO


Software intuitivo, integrado, se controla mediante el ratón y conectado a la cámara. Cuenta con una cámara, un panel de control de enfoque automático y una barra de herramientas de medición.

ILUMINACION

- Un anillo de luz LED estándar asegura una buena iluminación de la muestra
- Un anillo de luz con 12 LED direccionales de 30° de 1 W permite una iluminación flexible sobre la muestra



● MZ.4700-HDS

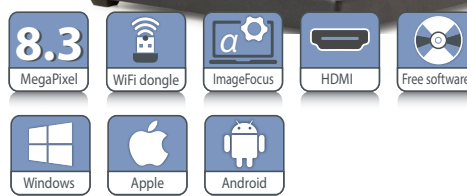

MZ.4700

350 (h) x 375 (w) x 250 mm (d) | 5.1 kg

ESTATIVO

- El MacroZoom se puede montar en un soporte de piñón y cremallera con o sin pantalla HD
- Con el anillo de luz LED direccional de 30° 12x 1W (MZ. 4735), el MacroZoom (MZ.4705) también se puede montar en los soportes de la NexiusZoom

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Se suministra con anillo de luz estándar, tarjeta SD de 32 GB, ratón, mochila WiFi, cable HDMI y fuente de alimentación externa 100-240 Vac / 12Vdc / 3A



● En combinación con el soporte NZ.9047

● Mochila WiFi

MODELOS	MacroZoom Digital AutoFocus	AutoFocus	Pantalla 11" HD	Estativo de columna estándar
MZ.4700	•	•		•
MZ.4700-HDS	•	•	•	•
MZ.4705	•	•		

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

- MZ.4700** MacroZoom digital de enfoque automático (1) con soporte estándar (2)
- MZ.4700-HDS** MacroZoom digital de enfoque automático (1) con soporte estándar (2) y pantalla HD
- MZ.4705** MacroZoom digital independiente de enfoque automático (1)



● MZ.4705



● MZ.4710



● MZ.4712

ACCESORIOS

- MZ.4710** Soporte estándar (2) para MZ.4705
- MZ.4712** Pantalla 11 inch HD para MZ.4710 incluye accesorio de fijación al soporte vertical
- MZ.4730** Anillo de luz LED estándar
- MZ.4735** Anillo de luz con 12 LED direccionales de 1W (2)

⁽¹⁾ Suministrado con un anillo de luz estándar, una tarjeta SD de 32 GB, mouse, mochila WiFi, Cable HDMI y fuente de alimentación externa 100-240 Vac / 12Vdc / 3A

⁽²⁾ Con el MZ.4735, también se puede montar un MZ.4705 en soportes NexusZoom



● MZ.4730



● MZ.4735

